

SISTEMA DE BAÑO ASISTIDO RECLINABLE DE ALTURA REGULABLE

Parker®



Con su característica puerta giratoria, Parker® está diseñado para permitir transferencias independientes o asistidas hacia el interior o el exterior de la bañera. La altura de Parker puede ajustarse y el residente puede colocarse en posición sentada o reclinada, lo que permite al cuidador y al residente elegir su posición preferida a fin de mejorar la experiencia del baño.

Producto diseñado para los niveles de movilidad A (Alberto), B (Bárbara) y C (Carlos). También es adecuado para el nivel de movilidad D (Doris) si se combina con una grúa pasiva.



Trasferencias independientes y asistidas

La altura de Parker puede ajustarse y el residente puede colocarse en posición sentada o reclinada. Su puerta lateral que se desliza hacia arriba está diseñada para permitir un acceso sencillo para pacientes o residentes con niveles de movilidad de la A a la C, sin necesidad de grúas para bañeras adicionales. Parker también es apto para residentes con un nivel de movilidad D si se usa en combinación con una grúa de techo pasiva.

Múltiples niveles de protección contra quemaduras

Incluye una pantalla digital que muestra la temperatura, válvulas de mezcla reguladoras para la temperatura y la presión, así como un sistema de apagado automático del agua caliente cuando la temperatura supera los niveles de seguridad.

Incremente el bienestar y los beneficios del baño

Parker permite elegir entre un baño convencional de inmersión o las funciones Air Spa™ y Sound and Vision™ para mejorar la relajación y sacar el máximo partido a los beneficios del baño para el bienestar del usuario.

Principales características

ACCESO LATERAL

Se integra con una amplia gama de equipos de ayuda a la transferencia a fin de facilitar las transferencias independientes y asistidas para personas con una movilidad limitada.

ALTURA REGULABLE Y RECLINABLE

Permite al cuidador trabajar a la altura que prefiera sin comprometer la comodidad del residente.

MÚLTIPLES FUNCIONES DE PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS

CABEZAL DE DUCHA CON GATILLO BLOQUEABLE

Permite al cuidador activar la ducha cuando está cerca del residente.



COJINES PARA LA CABEZA Y LA ESPALDA

Para ofrecer una mayor comodidad.

SISTEMA INTEGRADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (OPCIONAL)

AIR SPA (OPCIONAL)

Con nueve chorros de agua de velocidad controlada.

LLENADO AUTOMÁTICO

Llena automáticamente la bañera hasta alcanzar el nivel de agua preestablecido.

SOUND AND VISION (OPCIONAL)

Para disfrutar de una experiencia multisensorial mejorada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Carga de trabajo segura (CTS) máxima (paciente + agua)	300 kg (661 lb)
Peso máximo del paciente	210 kg (463 lb)
Peso total de la bañera	126 kg (280 lb)
Longitud total en posición vertical	1855 mm (73 in)
Longitud total en posición reclinada	1960 mm (77 1/2 in)
Anchura total	750 mm (29 1/2 in)
Altura de la puerta con la bañera en su posición más elevada, con los pies en la posición más baja	2510 mm (98 7/8 in)
Altura de asiento en la posición más baja	565 mm (22 1/4 in)
Altura de asiento en la posición más alta	685 mm (27 in)
Consumo de agua (volumen de llenado previo del fondo para los pies / nivel de llenado automático)	96 litros (25,4 galones)
Consumo de agua hasta el nivel de rebose	230 litros (60,8 galones)
Tiempo de llenado con 3 bar (43,5 PSI) de presión dinámica (llenado previo)	1,7 min
Tiempo de vaciado desde el nivel de llenado automático	3 min
Clase IP según IEC 60529	IP X4
Clase IP del mando de control y del mando de control del sistema Sound and Vision	IP X7
Presión estática máxima del agua	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Presión de funcionamiento mínima (algunas variantes dependen del país)	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- Pantalla de temperatura del agua
- Múltiples funciones de protección contra quemaduras
- Cabezal de ducha con gatillo bloqueable
- Llenado automático
- Desbordamiento
- Función de bloqueo del panel de control
- Inclinación y bajada de emergencia
- Parada de emergencia
- Cojín reposacabezas

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Sistema integrado de limpieza y desinfección
- Terapia Air Spa
- Terapia Sound & Vision
- Kit de cisterna de agua caliente
- Reposapiés y cojines para la espalda/asiento
- Embellecedor de la bañera disponible en azul o gris

REQUISITOS DE ESPACIO

El área azul indica el área de trabajo requerida para facilitar las tareas de transferencia e higiene para residentes con niveles de movilidad de A a C, al mismo tiempo que proporciona un acceso adecuado para el residente, los equipos y el cuidador. Puede que sea necesario contar con espacio adicional para facilitar la transferencia de los residentes con un nivel de movilidad D mediante el uso de una grúa pasiva.

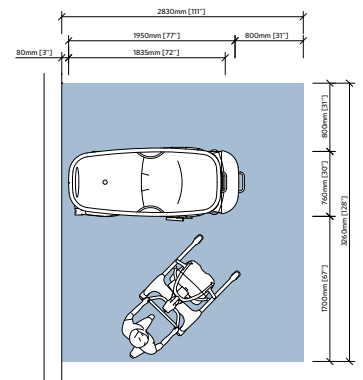

Más información detallada en www.arjo.es